

Emblema

CONFORT Y PRESTACIONES



Disfrute del más completo equipamiento con la mejor relación calidad-precio del mercado.

♣ Motores: 2x340W - Baterías: 2x41Ah

Velocidad máx. 9km/h - Autonomía máx. 32km

Display digital - Joystick con intensidad progresiva

Máxima robustez: peso máximo recomendado 136kg

♣ Múltiples ajustes para su mayor comodidad:

Silla plegable en anchura, altura y profundidad

Habitáculo ajustable (reposabrazos ajustables en anchura y altura)

Reposapiés y reposabrazos extraíbles, respaldo reclinable y abatible...

CONFORT - PRESTACIONES - SEGURIDAD - DISEÑO

Emblema

PLEGABLE Y AJUSTABLE



LONGITUD AJUSTABLE:

Para que ningún ascensor se interponga en su camino:

Longitud abierta : 110cm – Con reposapiés plegados o extraídos: 86cm

➤ **Longitud mínima : 81cm (reposapiés plegados y ruedines extraídos)**

ANCHURA AJUSTABLE:

Para guardar y transportar con facilidad:

Anchura normal: 63cm

➤ **Anchura mínima: 40cm**

ALTURA AJUSTABLE:

Para guardar y transportar con facilidad:

Altura normal: 97cm – Respaldo abatible y reclinable

➤ **Altura mínima: 76cm**

CONFORT - PRESTACIONES - SEGURIDAD - DISEÑO

Emblema

HABITABILIDAD Y ADAPTABILIDAD



Habitáculo regulable en anchura entre 43cm y 57cm

Reposabrazos ajustables en altura (14 cm) y en profundidad (2 pos).

Reposapiés plegables hacia arriba y abatibles hacia adentro.

Reposapiés regulables en altura y ángulo.

Reposabrazos y reposapiés extraíbles

CONFORT - PRESTACIONES - SEGURIDAD - DISEÑO

Emblema

DESMONTABLE Y TRANSPORTABLE



Baterías desmontables para un fácil transporte

Reposapiés y reposabrazos extraíbles

Peso total silla: 68kg

Desmontable para transportar con mayor facilidad:

♣ estructura silla: 39kg

♣ baterías: 21,5kg

♣ reposapiés/reposabrazos: 4kg

> Pieza más pesada a manejar tan solo 39kg

CONFORT - PRESTACIONES - SEGURIDAD - DISEÑO

Emblema

ROBUSTEZ Y SEGURIDAD



Chasis de aluminio ligero y resistente.

Peso máximo recomendado 135kg

Sistema dual confort para una mayor confort de marcha

Barra trasera estabilizadora

Freno inteligente (electromagnético regenerativo)

Ruedas todoterreno: grandes, confortables y anti pinchazos

Traseras 35cm - Delanteras 23cm

Horquillas de alta resistencia con posibilidad de ajuste en 3 alturas


Ruedines anti-vuelco de extracción rápida

Cinturón de seguridad

CONFORT - PRESTACIONES - SEGURIDAD - DISEÑO

Emblema

CONFORT Y ALTAS PRESTACIONES

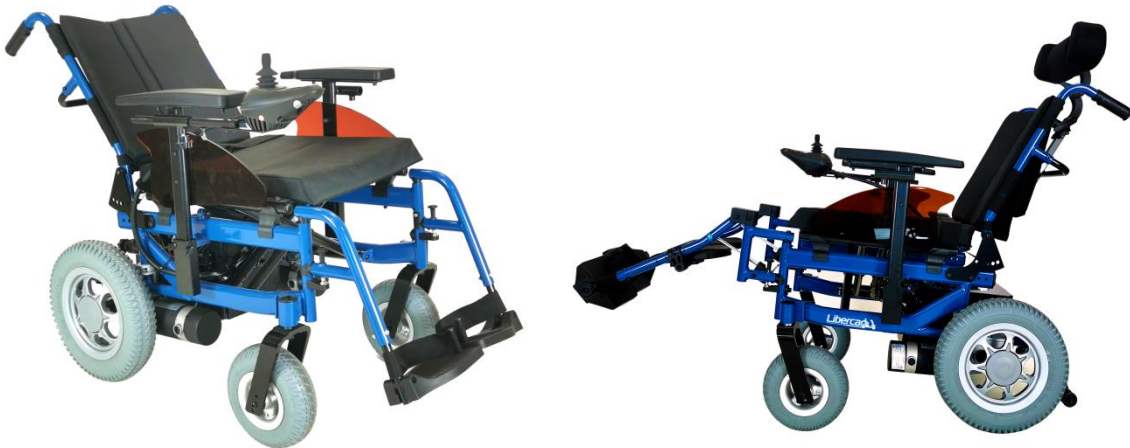

Múltiples opciones para buscar la posición más cómoda para el usuario tanto durante la marcha como para poder descansar tumbado:

Respaldo abatible y reclinable (4 posiciones)

Reposapiés elevable y reposacabezas regulable (opcionales)

Rueda delantera regulable en 3 alturas

Ruedas grandes y confortables – Habitáculo ajustable

Asiento y respaldo acolchados y anti-transpirantes



Joystick con display digital

Toma USB

Adaptable para diestros y zurdos

Joystick acompañante (opcional)

Intensidad de aceleración progresiva

Indicador de batería y avisador acústico

5 velocidades progresivas



CONFORT - PRESTACIONES - SEGURIDAD - DISEÑO

Emblema

ACCESORIOS



Para una mayor personalización de su silla, Libericar pone a su disposición una amplia gama de accesorios y opcionales:



- ♣ Adaptación joystick acompañante
- ♣ Reposacabezas
- ♣ Porta-latas / Porta-botellas
- ♣ Porta-bastón
- ♣ Porta-muletas
- ♣ Mochila
- ♣ Funda protectora
- ♣ Asiento calefactable
- ♣ Chubasquero



CONFORT - PRESTACIONES - SEGURIDAD - DISEÑO

Emblema

CERTIFICACIONES



CERTIFICADO CE DIRECTIVA 2017/745
PRODUCTO SANITARIO
NORMAS ISO 9001 E ISO 13485



CONFORT - PRESTACIONES - SEGURIDAD - DISEÑO

Emblema

CONFORT Y PRESTACIONES



ESPECIFICACIONES TECNICAS LIBERCAR EMBLEMA

Motores	2X340 W	Baterías (desmontables)	2x41 Ah
Velocidad max.	9 km/h	Velocidad marcha atrás	4 km/h
Autonomía max.	32 km	Joystick con display digital	SI
Chasis aluminio	SI	Barra estabilizadora	SI
Longitud normal silla	110 cm	Longitud silla sin reposapiés	86 cm
Longitud sin reposapiés y sin ruedines	81 cm	Altura normal silla	97 cm
Anchura normal silla	63 cm	Anchura silla plegada	40 cm
Rueda trasera grande anti-pinchazos	35 cm	Rueda delantera grande anti-pinchazos	23 cm
Altura rueda delantera ajustable	3 posiciones	Joystick posición acompañante	opcional
Reposacabezas	opcional	Reposapiés elevables	opcional
Reposabrazos regulables en anchura	SI	Anchura habitáculo ajustable	43cm-57cm
Reposabrazos regulables en altura	SI (14 cm)	Reposabrazos regulables profundidad	SI (2 pos)
Respaldo reclinable (hasta 130º)	SI (4 pos)	Respaldo abatible	SI
Reposapiés abatibles hacia arriba	SI	Reposapiés abatibles hacia adentro	SI
Reposapiés regulables en altura	SI	Reposapiés extraíbles	SI
Reposabrazos extraíbles	SI	Respaldo extraíble	SI
Peso estructura silla	39 kg	Peso caja baterías	21,5 kg
Peso usuario máximo recomendado	136 kg	Peso total silla	68 kg
Profundidad asiento	50 cm	Altura base asiento	46 cm
Pendiente máxima	18%	Pendiente de seguridad	12%
Respaldo acolchado	SI	Banda reposapiernas	SI
Adaptable diestros/zurdos	SI	Reflectantes traseros	SI
Cinturón de seguridad	SI	Posibilidad empuje manual	SI
Nº marchas	5	Intensidad joystick progresiva	SI
Certificado CE producto sanitario	CE 2017/745	Normas ISO9001 y ISO13485	SI

ACCESORIOS

Luces delanteras y traseras	SI	Joystick posición acompañante	SI
Reposacabezas	SI	Mochila	SI
Porta-muletas	SI	Porta-bastón	SI
Porta-latas	SI	Funda protectora	SI
Chubasquero	SI	Color personalizable	SI
Asiento calefactable	SI	Giro joystick 90º	SI

Los parámetros de velocidad max, autonomía max, pendiente max... son calculados en condiciones óptimas de ensayo.

En caso de tener que afrontar pendientes o superficies particulares (rampas de portales, garajes, suelos no adherentes...) consultar antes de comprar la posibilidad de prueba y devolución.

Nuestros modelos están en constante evolución, por lo que Libercar se reserva el derecho a modificar el diseño y las especificaciones indicadas

CONFORT - PRESTACIONES - SEGURIDAD - DISEÑO